



## Alfa Laval LeviMag®

Durch Magnetkupplung schwebend gelagertes Magnetrührwerk

### Einführung

Der Alfa Laval LeviMag® ist ein aseptischer Magnetmischer, der ein patentiertes schwebendes Laufrad und ein fortschrittliches Design verwendet, um bis zum letzten Tropfen zu mischen und die Produktausbeute zu maximieren.

Er ist kompakt, energieeffizient und wartungsfreundlich. Zudem bietet er Trockenlaufeigenschaften und effizientes Mischen bei niedrigen Drehzahlen, was eine schonende Produktbehandlung gewährleistet, sowie bei hohen Drehzahlen für hochintensives Mischen. Dies bietet eine größere Prozessflexibilität, um eine große Bandbreite an Flüssigkeitstypen und Mischaufgaben zu bewältigen.

Sein offenes Design und die langsame Rotation während der Reinigung tragen zu einer effektiven Entfernung von Rückständen bei und minimieren das Kontaminationsrisiko durch Verschleißpartikel. All dies trägt zu einem schnellen Kapitalrendite und einer maximalen Produktausbeute in Tanks mit einer Größe zwischen 30 und 40.000 Litern bei.

Er wird mit Alfa Laval Q-doc geliefert, einem umfassenden Dokumentationspaket, das volle Transparenz in der gesamten Lieferkette bietet.

### Anwendungen

Der Alfa Laval LeviMag Magnetmischer bietet effektives Mischen für zahlreiche Prozesse in der Molkerei-, Lebensmittel-, Getränke-, Biotechnologie-, Pharma- und anderen Industrien, die hohe Anforderungen an die sterile oder aseptische Lagerung oder Verarbeitung stellen.

### Vorteile

- Maximale Prozesseffizienz, minimaler Produktverlust
- Optimaler Durchfluss bei höherem Wirkungsgrad und geringerem Energieverbrauch
- Mischen bis zum letzten Tropfen für maximale Ausbeute durch geringes Rühren und Trockenlauffähigkeit
- Optimiertes Cleaning-in-Place (CIP) durch volle Entleerbarkeit
- Minimierte Ausfallzeiten durch einfache Wartung

### Standardausführung

Der Alfa Laval LeviMag besteht aus einer abnehmbaren Antriebseinheit, einer schwebenden Laufradeinheit mit Radiallamellen, Dichtungen, Keramiklagern und Magnetkupplung, Schweißplatte und Anschlüssen. Er ist in fünf Größen mit Mischgeschwindigkeiten von 10 U/min bis zu 800 U/min erhältlich.

### Arbeitsprinzip

Ein Laufrad mit Radiallamellen, das im Inneren des Tanks installiert ist, dreht sich aufgrund des Drehmoments der Magnetkupplung. Durch die Rotation des Laufrads wird die Flüssigkeit im Tank vermischt. Das einzigartige Design der Alfa Laval Magnetkupplung gewährleistet jederzeit die Levitation des Laufrades. Dies ermöglicht den Trockenlauf und die vollständige Entleerbarkeit der Prozessflüssigkeiten aus dem



Tank. Dies gewährleistet eine hocheffiziente Durchmischung bis zum letzten Tropfen und damit eine maximale Ausbeute. Außerdem ermöglicht sie den freien Fluss der CIP-Flüssigkeit und des Dampfes um alle Teile des Mixers und gewährleistet so eine gründliche Reinigung. Durch die Levitation des Laufrades wird auch der axiale Verschleiß eliminiert.

**Erhältliche Varianten**

- Laufrad mit Außen-/Innenlager
- Laufrad komplett, mit Antriebseinheit
- Laufrad für Drehzahlgeber vorbereitet
- ATEX-Ausführung (Kat. II -/2G Ex h IIC T4 -/Gb)

**Zubehör:**

- Schweißplatten
- Werkzeuge für Inspektion und Service
- Installationswerkzeuge

**Ausführungen der Antriebseinheit**

- Lackiert (Lüfter belüftet)
- Reinraumausführung, Versiegelte Oberfläche Konversionsbehandlung (glatt, geschlossen, nicht belüftet)
- Erweiterte Konsole für isolierte Tanks

**Einbauten:**

Oberflächengüte produktberührter Teile:	Ra <0,8 µm Mech. Poliert
Betriebsdruck:	-1 bis 7 bar (g)
Laufraddurchmesser:	100, 150, 200, 250 & 300 mm

**Schweißplatte:**

Größe WP50:	Für Laufradgrößen 100 und 150 mm
Größe WP81:	Für Laufradgrößen 200, 250 und 300 mm

**Antriebsaggregat:****Motor, IE4 (Standard):**

Eingebauter Dauermagnet-Synchronmotor (IPMSM), der mit einem Frequenzumrichter für IE4-Motoren betrieben werden muss. Der Frequenzumrichter (nicht im Alfa Laval-Lieferumfang enthalten) muss für die am Einsatzort verfügbare Spannung bestellt werden.

Leistungsklasse:	IE4
Gehäuse/Motorschutz:	IP66
Ausführung:	Blau
Nennleistung:	1,1 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 217 VAC, in Dreieck geschaltet, 70 Hz, 2100 U
Nennstrom:	3,59 A
Ausführung:	Reinraum, WP50
Nennleistung:	0,75 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 199 VAC, in Dreieck geschaltet, 70 Hz, 2100 U
Nennstrom:	2,53 A
Ausführung:	Reinraum, WP81
Nennleistung:	1,1 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 195 VAC, in Dreieck geschaltet, 70 Hz, 2100 U
Nennstrom:	3,61 A
Ländercode:	Alle (ein Typ deckt alle ab)

**Motor, Option Premium/CUS:**

Leistungsklasse:	Premium
Gehäuse/Motorschutz:	IP66
Ausführung:	Blau, WP50
Nennleistung:	0,37 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 265 VAC, angeschlossen in Dreieck, 60 Hz
Nennstrom:	1,40 A
Ausführung:	Blau, WP81
Nennleistung:	0,75 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 265 VAC, angeschlossen in Dreieck, 60 Hz
Nennstrom:	2,72 A
Ländercode:	US/CA

**Motor, Option ATEX:**

Leistungsklasse:	IE1 (WP50), IE2 (WP81)
Gehäuse/Motorschutz:	IP66
Sicherheitsklasse:	II2G Ex de IIC T4
Ausführung:	Blau, WP50
Nennleistung:	0,25 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 230 VAC, angeschlossen in Dreieck, 50 Hz
Nennstrom:	1,30 A
Ausführung:	Blau, WP81
Nennleistung:	0,75 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 230 VAC, angeschlossen in Dreieck, 50 Hz
Nennstrom:	2,94 A
Ländercode:	EU + Nicht spezifisch

**Motor, Option LV-Explosionsschutz Motor:**

Leistungsklasse:	Premium
Gehäuse/Motorschutz:	IP66
Sicherheitsklasse:	Klasse1 Div1 Gruppe D
Ausführung:	Blau, WP50
Nennleistung:	0,37 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 208-230 VAC, angeschlossen in Dreieck, 60 Hz
Nennstrom:	2,1 – 2,0 A
Ausführung:	Blau, WP81
Nennleistung:	1,1 kW
Nennspannung und Frequenz (vom Frequenzumrichter):	Ausgang 230 VAC, angeschlossen in Dreieck, 60 Hz
Nennstrom:	4,4 A
Ländercode:	US/CA

**Getriebe:**

Hocheffizienter Kegelstirnrad-Winkelgetriebemotor.

Schmiermittel:	Lebensmitteltaugliches Öl: 0° – 45 °C Unterschiedliche Winkelintervalle je nach Konfiguration - Hinweis: Motor darf nicht abwärts gerichtet sein)
Maximaler Montagewinkel zu Horizontalen:	
Oberflächengüte Antriebseinheit, Standard:	Blau lackiert, RAL 5010
Oberflächengüte Antriebseinheit, Option Reinraum:	Versiegelte Oberfläche Konversionsbehandlung, glattes Gehäuse (kein Lüfter)

**Konsole/Flansch:**

Standardhöhe oder Option für erweiterte Höhe für isolierte Tanks.

Aufsatz, Größe WP50:	Klemmverbindung
Aufsatz, Größe WP81	Flansch-Bolzen-Verbindung

**Physikalische Daten****Werkstoffe:**

Laufrad und Anschweißplatte:	AISI 316L (UNS S31603)
Antriebsrotor, Welle und Konsole/Flansch:	AISI304 (UNS S30400)
Getriebemotoröl, lackiert:	C2 nach DIN 12944 (NSF/ANSI 51-2009e)
Getriebemotor, Reinraum:	Permanent Bond-Oberfläche (nsd tupH) - komplett mit FDA Titel 21 CFR 175.300
Führungsstift:	Zirkoniumdioxid YTZP
Innenlager:	Siliziumkarbid (EN 12756)
Dichtungen:	FEP/FKM
Getriebeöl:	USDA H1

**Temperaturen:**

Während des Mischvorgangs, Medium:	Max. 90 °C
Während des CIP (max. 50 U/min):	Max. 95 °C
Während des SIP (max. 10 U/min):	Max. 125 °C
Während des SIP (max. 0 U/min):	Max. 150 °C

**Max. Drehzahl:**

Lauftradgröße 100	800 U/min (81 Hz)
Lauftradgröße 150	480 U/min (48,5 Hz)
Lauftradgröße 200	480 U/min (83 Hz)
Lauftradgröße 250	230 U/min (40 Hz)
Lauftradgröße 300	200 U/min (34,5 Hz)

## Dokumentation:


Standardmäßig mit Q-Doc, einschließlich:

- Einhaltung der Verordnung (EG) Nr.: 1935/2004
- Einhaltung der (Ex/ATEX) Richtlinie 2014/34/EU (Option ATEX, II -/2G Ex h IIC T4 -/Gb)
- Einhaltung der EG-Verordnung für GMP
- 3.1 Materialzeugnisse nach EN10204 (MTR) für alle medienberührten Teile
- Einhaltung der FDA CFR 21 (nichtmetallische Teile) für Elastomere, Keramik und Getriebeöl.
- TSE- (Transmissible spongiforme Enzephalopathie) / ADI- (Bestandteile tierischen Ursprungs) Erklärung
- Konformitätserklärung der Oberflächenbeschaffenheit


## Aufbau:

1. Laufrad
2. Dichtungen
3. Innenlager
4. Führungsstift
5. Schweißplatte
6. Klemmringanschluss (nur WP50)
7. Flansch-Schraubenanschluss (nur WP81)
8. Antriebsaggregat


LeviMag WP50

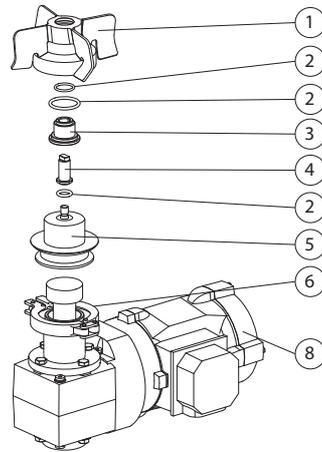

LeviMag WP81

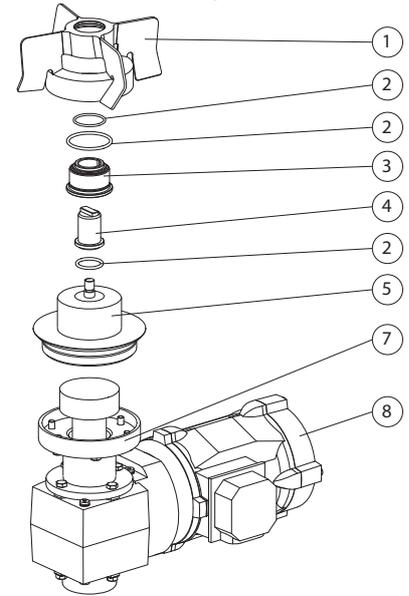


Abmessungen:  
LeviMag WP50

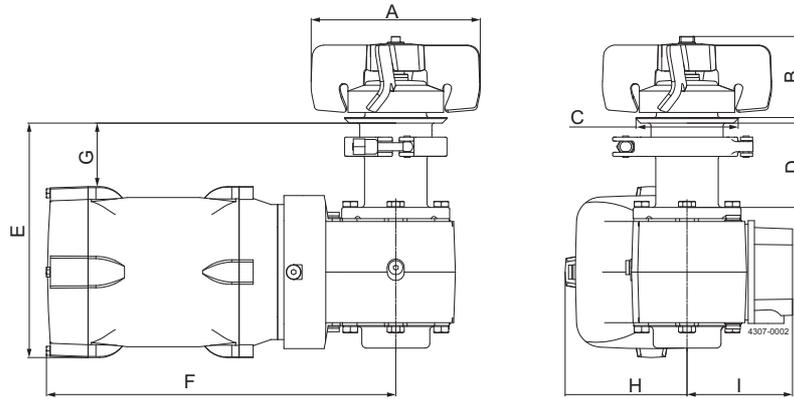

Modell	Größe WP50 - Ø100 Laufrad				Größe WP50 - Ø150 Laufrad			
	Standard- Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Standard- Konsolenhöhe + Reinraum- Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Reinraum- Getriebemotor	Standard- Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Standard- Konsolenhöhe + Reinraum- Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Reinraum- Getriebemotor
A	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
B	72	72	72	72	72	72	72	72
C	Ø90	Ø90	Ø90	Ø90	Ø90	Ø90	Ø90	Ø90
D	75	125	75	125	75	125	75	125
E IE4	215	265	209	259	215	265	209	259
F IE4	340	340	308	308	340	340	308	308
G IE4	50	100	57	107	50	100	57	107
H IE4	114	114	108	108	114	114	108	108
I IE4	111	111	93	93	111	111	93	93
E Premium/CUS	202	252	-	-	202	525	-	-
F Premium/CUS	318	318	-	-	318	318	-	-
G Premium/CUS	63	113	-	-	63	113	-	-
H Premium/CUS	105	105	-	-	105	105	-	-
I Premium/CUS	94	94	-	-	94	94	-	-
E ATEX	202	252	-	-	202	252	-	-
F ATEX	373	373	-	-	373	373	-	-
G ATEX	62	112	-	-	62	112	-	-
H ATEX	105	105	-	-	105	105	-	-
I ATEX	119	119	-	-	119	119	-	-
E LV Explosions- geschützt	223	273	-	-	223	273	-	-
F LV Explosions- geschützt	520	520	-	-	520	520	-	-
G LV Explosions- geschützt	45	95	-	-	45	95	-	-
H LV Explosions- geschützt	123	123	-	-	123	123	-	-
I LV Explosions- geschützt	142	142	-	-	142	142	-	-

LeviMag WP81

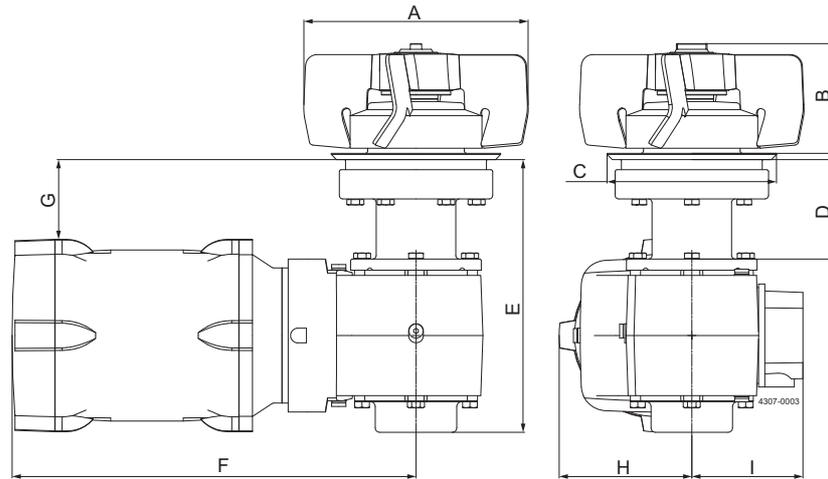

Modell	Größe WP81 - Ø200 Laufrad				Größe WP81 - Ø250 Laufrad				Größe WP81 - Ø300 Laufrad			
	Standard-Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Standard-Konsolenhöhe + Reinraum-Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Reinraum-Getriebemotor	Standard-Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Standard-Konsolenhöhe + Reinraum-Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Reinraum-Getriebemotor	Standard-Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Lackierter Getriebemotor	Standard-Konsolenhöhe + Reinraum-Getriebemotor	Erweiterte Konsolenhöhe + Reinraum-Getriebemotor
A	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø300	Ø300	Ø300	Ø300
B	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
C	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149	Ø149
D	89	139	89	139	89	139	89	139	89	139	89	139
E IE4	243	293	243	293	243	293	243	293	243	293	243	293
F IE4	354	354	357	357	354	354	357	357	354	354	357	357
G IE4	74	124	70	120	74	124	70	120	74	124	70	120
H IE4	114	114	117	117	114	114	117	117	114	114	117	117
I IE4	111	111	98	98	111	111	98	98	111	111	98	98
E Premium/CUS	243	293	-	-	243	293	-	-	243	293	-	-
F Premium/CUS	354	354	-	-	354	354	-	-	354	354	-	-
G Premium/CUS	78	128	-	-	78	128	-	-	78	128	-	-
H Premium/CUS	110	110	-	-	110	110	-	-	110	110	-	-
I Premium/CUS	112	112	-	-	112	112	-	-	112	112	-	-
E ATEX	294	344	-	-	294	344	-	-	294	344	-	-
F ATEX	418	418	-	-	418	418	-	-	418	418	-	-
G ATEX	77	127	-	-	77	127	-	-	77	127	-	-
H ATEX	110	110	-	-	110	110	-	-	110	110	-	-
I ATEX	144	144	-	-	144	144	-	-	144	144	-	-
E LV Explosionsgeschützt	248	298	-	-	248	298	-	-	248	298	-	-
F LV Explosionsgeschützt	534	534	-	-	534	534	-	-	534	534	-	-
G LV Explosionsgeschützt	69	119	-	-	69	119	-	-	69	119	-	-
H LV Explosionsgeschützt	123	123	-	-	123	123	-	-	123	123	-	-
I LV Explosionsgeschützt	142	142	-	-	142	142	-	-	142	142	-	-

### Maschinenauswahl:

LeviMag kann im Alfa Laval-Konfigurator dimensioniert und konfiguriert werden.  
Die Größenauswahl kann auch mithilfe der unten stehenden Auswahltabellen erfolgen.  
Benötigte Informationen zur Größenauswahl:

- Medienviskosität
- Tankvolumen
- Tankdurchmesser und Tankbodenform.
- Leistung (siehe Leistungsstufe unten)

Leistungsstufe	Anwendung	Bezeichnung
1	Medien homogen halten	Homogenisierung von Flüssigkeiten und Wärmeübertragung mit geringem Gradienten
2	Mildes Mischen	Einfaches Mischen von mischbaren Flüssigkeiten und Wärmeübertragung mit hohem Gradienten, keine spezifische Anforderung an die Mischzeit, erzeugt Suspension, wenn die Ablagerungsgeschwindigkeit unter 0,015 m/s liegt
3	Mischen	Mischen von Flüssigkeiten, relativ geringe Mischzeit, erzeugen eine Suspension, wenn die Ablagerungsgeschwindigkeit unter 0,03 m/s liegt
4	Leistungsstarkes Mischen	Lösende Feststoffe, sehr geringe Mischzeit, erzeugen eine Suspension, wenn die Absetzgeschwindigkeit unter 0,06 m/s liegt.

### Voraussetzungen für die Verwendung der Auswahltabellen:

- Die Flüssigkeitshöhe muss gleich oder niedriger als das 2½-fache des Tankdurchmessers sein
- Das spezifische Gewicht des Mediums muss kleiner oder gleich 1,1 sein
- wenn der Betrieb eine Suspension von Partikeln beinhaltet (siehe Ablagerungsgeschwindigkeitsgrenzen in den Leistungsstufe), muss der Behälterdurchmesser D Folgendes aufweisen:

$$D \leq \sqrt[3]{\frac{V + 4}{\pi}}$$


wobei V das Netto-Volumen ist.

- Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wenden Sie sich bitte an weltweiten Alfa Laval technischen Support.

### So wählen Sie aus:


1. Leistungsstufe auswählen
2. Vorbedingungen prüfen
3. Wechseln Sie zum Diagramm für die gewählte Leistung
4. Lesen Sie den Punkt für das gewünschte Tankvolumen (X-Achse) und die Viskosität (Y-Achse) aus
5. Wählen Sie die Kurve rechts vom Punkt
6. Wenn es physikalisch möglich ist, kann immer eine größere Laufradgröße gewählt werden, z. B. um eine schonendere Produktbehandlung zu erreichen (Betrieb bei niedrigerer Drehzahl)

Leistungsstufe 1: Medien homogen halten  
Volumen vs. Viskosität

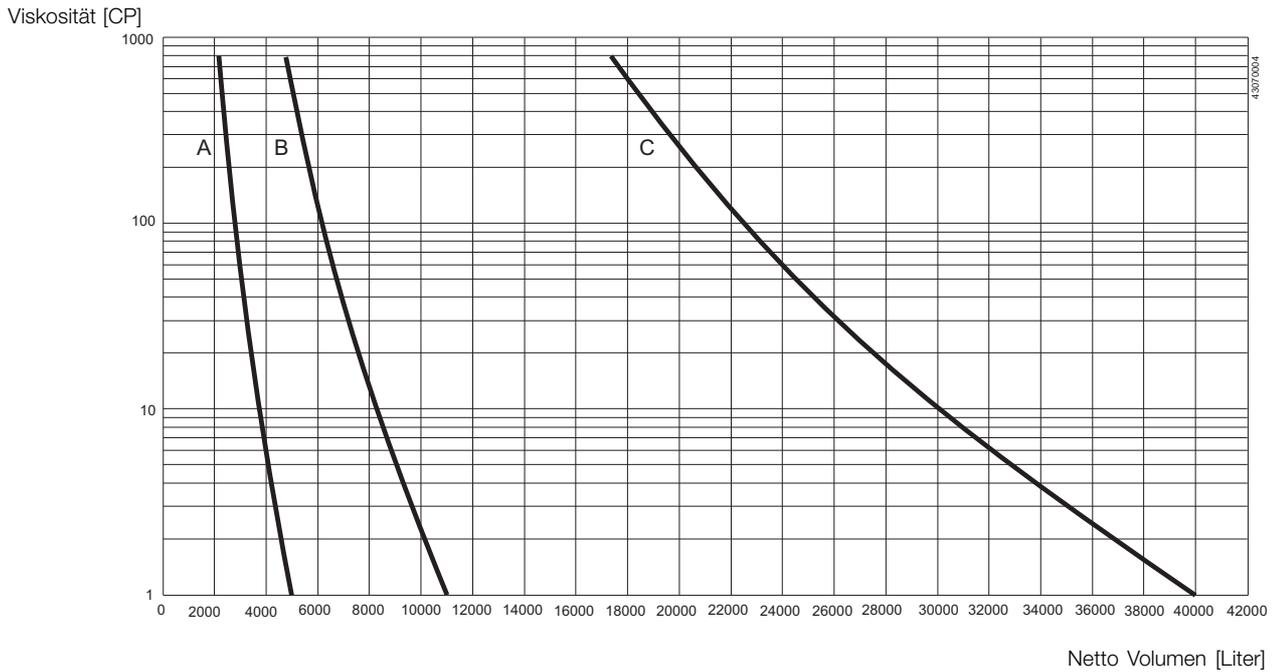


- A: LeviMag-Größe 100 mm
- B: LeviMag-Größe 150 mm
- C: LeviMag-Größe 200, 250 und 300 mm

Leistungsstufe 2: Mildes Mischen  
Volumen vs. Viskosität

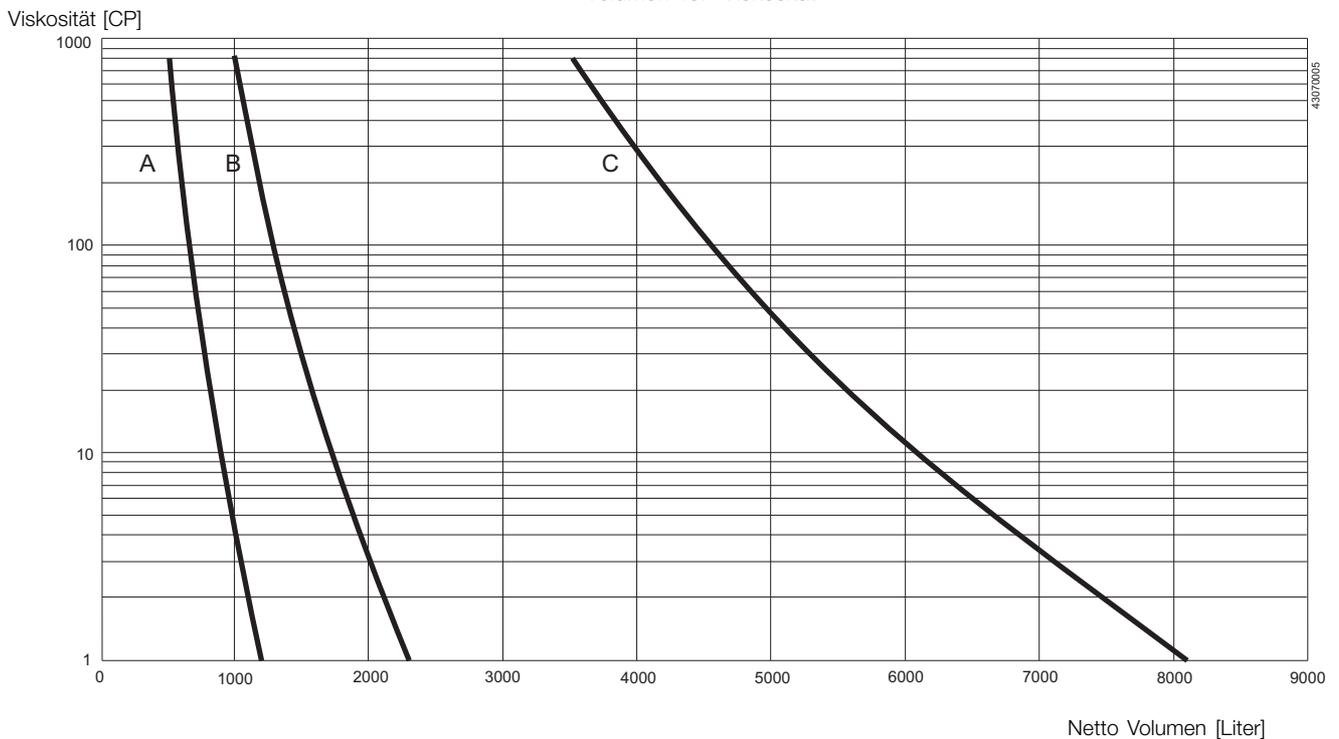


- A: LeviMag-Größe 100 mm
- B: LeviMag-Größe 150 mm
- C: LeviMag-Größe 200, 250 und 300 mm

Leistungsstufe 3: Mischen  
Volumen vs. Viskosität

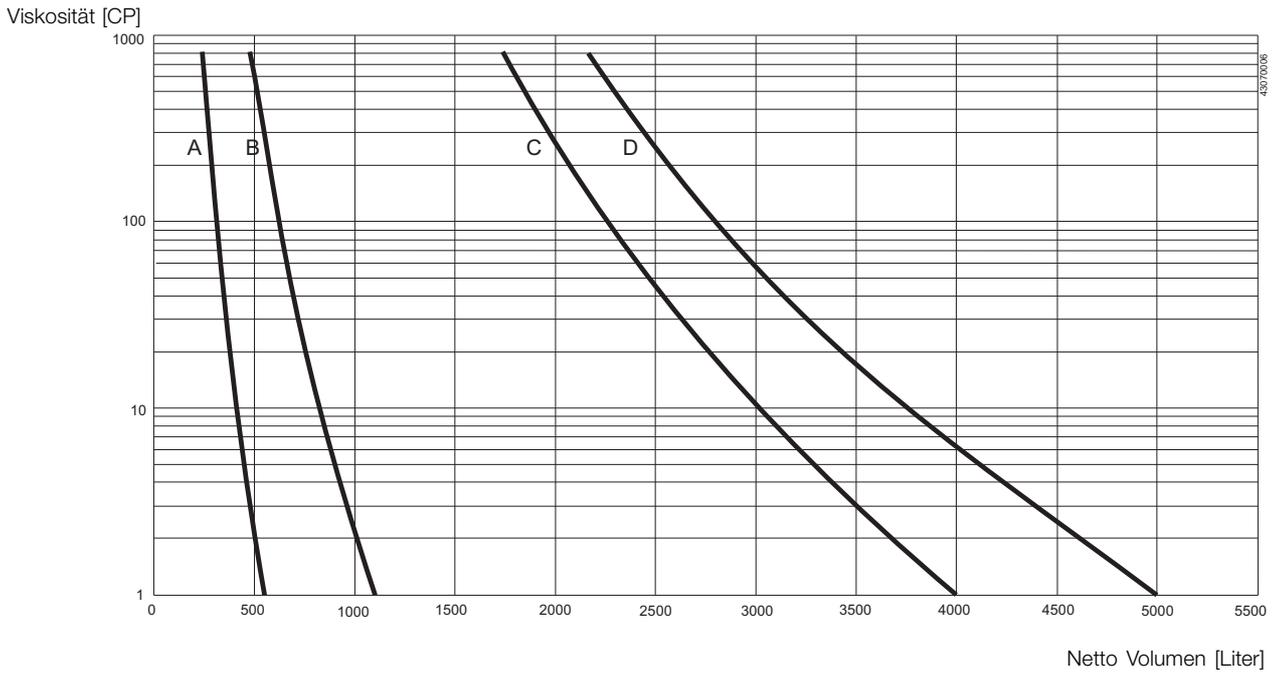

- A: LeviMag-Größe 100 mm
- B: LeviMag-Größe 150 mm
- C: LeviMag-Größe 200, 250 mm
- D: LeviMag-Größe 300 mm

Leistungsstufe 4: Leistungsstarkes Mischen  
Volumen vs. Viskosität

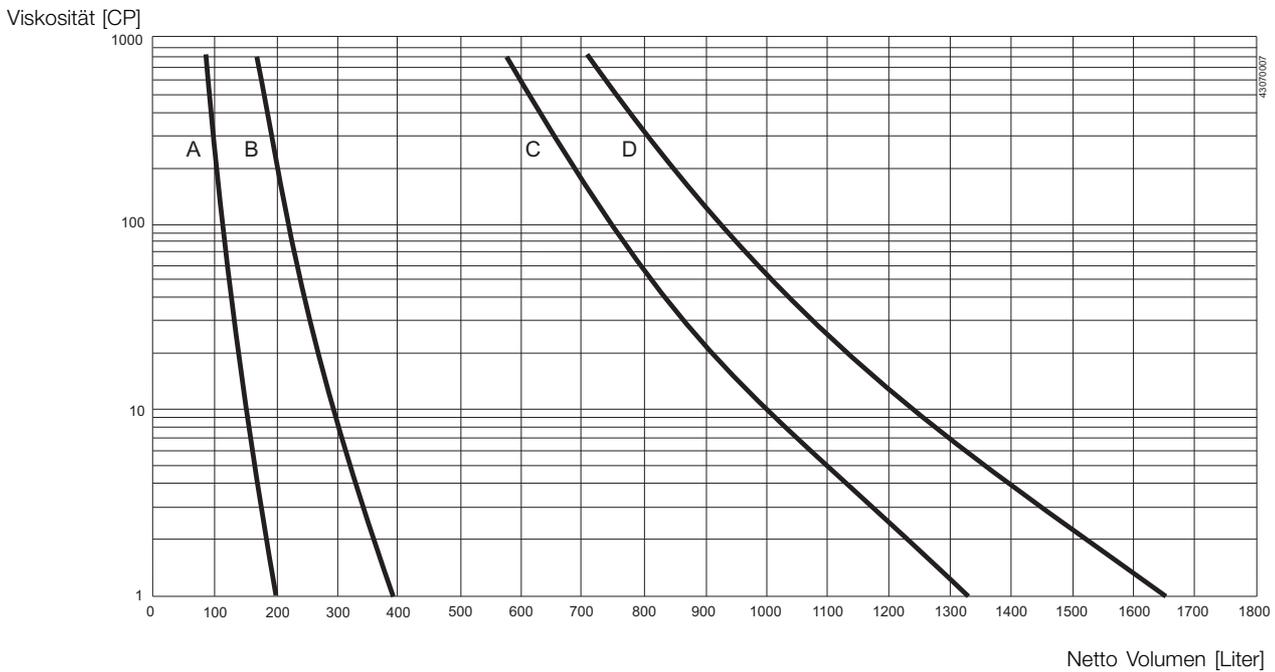

- A: LeviMag-Größe 100 mm
- B: LeviMag-Größe 150 mm
- C: LeviMag-Größe 200, 250 mm
- D: LeviMag-Größe 300 mm



Die hier enthaltenen Informationen sind korrekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; geringfügige Änderungen jedoch vorbehalten.

---

**Wie nehme ich Kontakt zu Alfa Laval auf?**

Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer Website gepflegt.  
Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com).